


# SYNCA

## KULLANIM KILAVUZU

Kas Perküsyon Masaj Tabancası  
Model: HM 190 Kitta

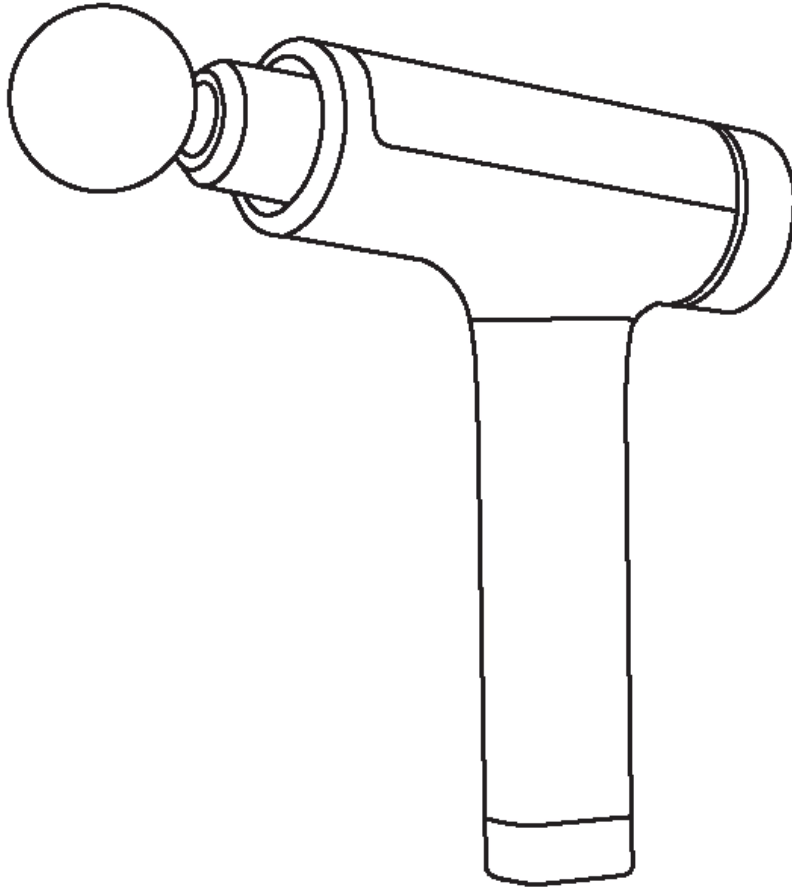

## Uyarı



Uyarı - Aşağıdaki durumlarda kullanmadan önce doktorunuza danışın:

- Açık bir yaranız varsa, kan sulandırıcı ilaç kullanıyorsanız veya başka bir ciddi damar rahatsızlığınız varsa
- Kalp rahatsızlığınız varsa veya kalp pili ya da defibrilatör kullanıyorsanız
- Şu anda hamileyseniz veya kanserle mücadele ediyorsanız
- Minimum kas kapsamı olan bölgelere masaj yapmayı planlıyorsanız

Bu cihazı baş, yüz, servikal bölge veya omur/omurilik gibi hassas bölgelere masaj yapmak için kullanmayın.

- 1) Şarj ederken bataryanın "AÇIK" olduğundan emin olun.
- 2) Şarj olurken üniteyi kullanmayın.
- 3) Kullanım sırasında herhangi bir nedenle vücudunuzun herhangi bir parçasını veya başka bir nesneyi masaj başlığı ile dış muhafaza arasındaki boşluğa sokmayın.
- 4) Çocukların veya yetişkin gözetimine ihtiyaç duyan herhangi birinin uygun gözetim olmadan ürünü kullanmasına izin vermeyin.
- 5) Bu ürünü sökmeyin veya üzerinde değişiklik yapmayın.
- 6) Kullanımı 10-15 dakikalık masajla sınırlandırmanızı ve masaj seansları arasında en az 5 dakikalık soğuma süresi bırakmanızı öneririz.
- 7) Cihaz durursa veya anormal şekilde çalışırsa kullanmayı bırakın ve müşteri hizmetleriyle iletişime geçin.
- 8) Masaj aletini şarj etmek için yalnızca ürünle birlikte verilen pil şarj cihazını kullanın.

Şarj cihazı göstergesinin yeşil olması pilin dolu olduğu anlamına gelir.




## ÜRÜN- AKSESUARLAR


### 6- Bağımsız Güç Seviyeleri

Kitta Perküsif Spor Terapi Masaj Aleti taşınabilir, şarj edilebilir, yüksek torklu bir masaj terapi cihazıdır. En çok ihtiyaç duyduğunuz anda hızlı ve etkili masaj yapmanıza yardımcı olmak için uzun ömürlü bir pil, 6 güç ayarı ve 6 değiştirilebilir masaj terapisi aparatı kullanır. Masaj yapılan bölgede sıvı değişimini uyararak ve kas gerginliğini azaltarak kas yorgunluğunu azaltmaya yardımcı olur. Hareket halinde olmasanız bile, bu olumlu faydaları ister evde ister iş yerindeki masanızda otururken sağlayabilirsiniz.

- **Kas Tabancası**

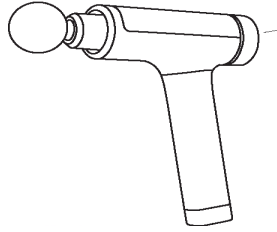

- **Dijital Ekran**

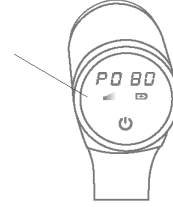

- **Masaj Başlıkları**



**Yuvarlak**



**Düz**



**Çatal**



**Kama**



**Konik**



**Çift Başlı**

- **Seyahat çantası:** Kitta'nızı kolayca yanınıza almanızı sağlar.

## KULLANIMI



- 1) Kitta'yı şarj ettikten sonra Kitta Masaj Aletini kutusundan çıkarın ve şarj cihazının fişini çekin.
- 2) İsteddiğiniz masaj başlığını takmak için aşağıdaki adımları tamamlayın:
  - a) Kitta'nın fişinin çekili ve gücün kapalı olduğundan emin olun.
  - b) Masaj başlığını, Kitta'nın izin verdiği ölçüde ürünün içine yerleştirin.
  - c) Önceden takılmış bir masaj başlığını çıkarıyorsanız, masaj başlığını dışarı doğru çekmeniz yeterlidir.
- 3) Keyfini çıkarmaya hazır olduğunuzda Çalıştır / Durdur düğmesine basın ve masaj cihazı çalışmaya başlayacaktır.
- 4) Tercih edilen masaj yoğunluğunu ayarlamak için 1-6 yoğunluk seviyesi arasında seçim yapmak üzere Masaj Gücü düğmesine basın.
- 5) Güç Ekranı sağ üsttedir ve 99'dan 1'e kadar geri sayar. 99 tam güçtedir, 1'de güç tükenmiştir ve yeniden şarj edilmesi gerekir. Ayrıca ekranın tam güçte yeşil, güç tükenirken kırmızı olduğunu fark edeceksiniz.
  - Pil %10'un altına düşerse E1 hatası görebilirsiniz, bu üniteyi derhal şarj etmeniz gerektiği anlamına gelir.
- 6) 10 dakika sonra cihaz otomatik olarak kapanacaktır.
- 7) Masaj sırasında masaj başlığını kendinize veya bir başkasına çok fazla bastırırsanız, cihaz otomatik olarak kapanacak ve E3 hatası verecektir. Böyle bir durumda gücü kapatıp açın ve masaj aletini çok sert şekilde bastırmadan kullanmaya devam edin.

## TEKNİK ÖZELLİKLER

İsim : Kitta - Perküsif Spor Terapi Masaj Aleti  
Tip : HM190  
Adaptör : Giriş: 100-240V~50/60Hz  
Çıkış : DC16.8V 0.8A  
Pil Türü : Li-ion 2000mAh 14.8V  
Pil Ömrü : Yaklaşık 5-10 saat  
Pil Şarj Süresi: Yaklaşık 2,5 - 3 saat

Sayfa 7

Ürünümüzü satın aldığınız için teşekkür ederiz.

Synca ürünlerini bizim kadar beğeneceğinizi umuyoruz. Lütfen [www.synca-wellness.us](http://www.synca-wellness.us) adresinden ürün kataloğumuzun tamamına göz atmakta tereddüt etmeyin.

Ürününüzden en iyi deneyimi edinmenizi sağlamak için lütfen bu kullanım kılavuzunu tamamen okuyun. Bir sorunuz olursa bizi aramaktan çekinmeyin, yardımcı olmaktan mutluluk duyarız.

Not:

Ekran üzerindeki plastik film cihazın yeni olduğu anlamına gelir, kullanmadan önce bunu sökün.

Sayfa 8

HM190 Kullanım Kılavuzu EG (ABD)

29/TEMMUZ/2020