


S Y N C A

Kullanıcı Kılavuzu

Quzy

Boyun ve Omuz Masaj Aleti

Model :SM260

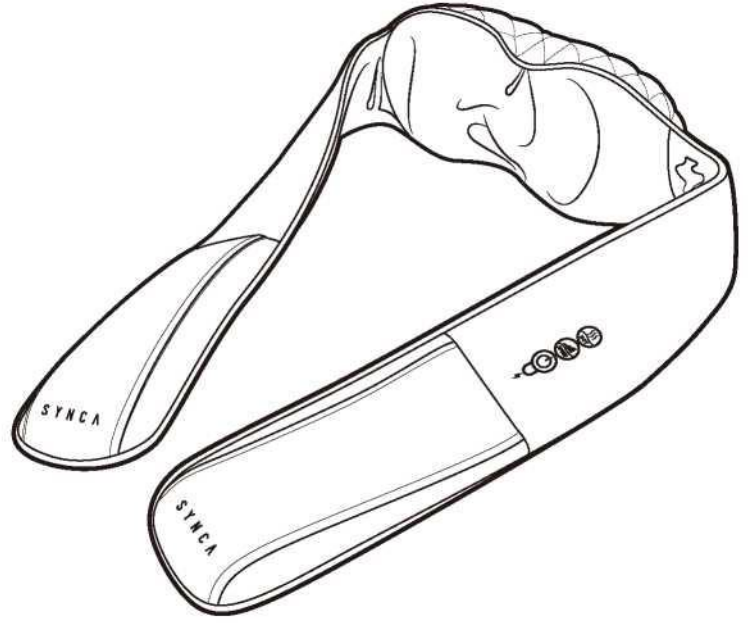

Bu kılavuz kolayca başvurulabilmesi için el altında bulundurulmalıdır.
Güvenli ve verimli bir kullanım için size rehberlik eder.

ÖNEMLİ GÜVENLİK TALİMATLARI

Ürünü kullanırken, aşağıdakiler de dahil olmak üzere tüm talimatlara ve temel önlemlere her zaman uyulmalıdır:

TEHLİKE UYARISI

— Elektrik çarpması riskini azaltmak için:

Bu ürünü kullandıktan hemen sonra ve temizlemeden önce daima fişini prizden çekin.

DİKKAT

— Yanık, yangın, elektrik çarpması veya kişilerin yaralanması riskini azaltmak için:

1. Ürün fişe takılıyken asla gözetimsiz bırakılmamalıdır. Kullanılmadığında ve parçaları takmadan veya çıkarmadan önce fişini prizden çekin.
2. Battaniye veya yastık altında çalıştırmayın. Aşırı ısınma meydana gelebilir ve yangına, elektrik çarpmasına veya kişilerin yaralanmasına neden olabilir.
3. Bu cihaz çocuklar, sakatlar veya engelli kişiler tarafından veya bunların yakınında kullanıldığında yakından gözetim gereklidir.
4. Bu ürünü yalnızca bu kılavuzda açıklanan kullanım amacı doğrultusunda kullanın. Üretici tarafından tavsiye edilmeyen ek parçaları kullanmayın.
5. Düşürüldüğünde, kablosu veya fişi hasar gördüğünde, arızalandığında veya suya düştüğünde bu ürünü asla çalıştırmayın. Ürünü inceleme ve onarım için servis merkezine götürün.
6. Bu ürünü besleme kablosundan tutarak taşımayın veya kabloyu taşıma kolu olarak kullanmayın.
7. Kabloyu ısıtılmış yüzeylerden uzak tutun.

DİKKAT

8. Ürünü asla hava delikleri tıkalıyken çalıştırmayın, hava deliklerini tüy, saç ve benzerlerinden arındırılmış halde tutun.
9. Asla herhangi bir cismi herhangi bir açıklığa düşürmeyin veya sokmayın.
10. Açık havada kullanmayın.
11. Aerosol (sprey) ürünlerin kullanıldığı veya oksijen verilen yerlerde çalıştırmayın.
12. Bağlantıyı kesmek için, tüm düğmeleri kapatın ve fişi prizden çekin.
13. Bu cihaz, 8 yaş ve üzeri çocuklar ve fiziksel, duyuşal veya zihinsel yetenekleri azalmış veya deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından, cihazın güvenli bir şekilde kullanılmasına ilişkin gözetim veya talimat verildiği ve ilgili tehlikeleri anladıkları takdirde kullanılabilir. Çocuklar cihaz ile oynamamalıdır. Temizlik ve kullanıcı bakımı, gözetim olmadan çocuklar tarafından yapılmamalıdır.
14. Ürünü yanlış kullanmadıklarından emin olmak için çocuklar gözetim altında tutulmalıdır.
15. Cihazın ısıtılmış bir yüzeyi vardır. Isıya karşı hassas olmayan kişiler cihazı kullanırken dikkatli olmalıdır. Ciddi yanıklara neden olabilir. Hassas olmayan cilt bölgelerinde veya yetersiz kan dolaşımının olduğu durumlarda kullanmayın. Isının çocuklar veya ehliyetsiz kişiler tarafından gözetimsiz kullanımı tehlikeli olabilir. Cihazın ısıtılmış bir yüzeyi vardır. Isıya karşı hassas olmayan kişiler cihazı kullanırken dikkatli olmalıdır.
16. Cihaz, yalnızca cihaz üzerindeki işarete karşılık gelen emniyetli ekstra düşük voltajda beslenmelidir.
17. Cihaz sadece cihazla birlikte verilen güç kaynağı ünitesi ile kullanılmalıdır.

BU TALİMATLARI DİKKATE ALIN

Bu ürün sadece ev kullanımı için tasarlanmıştır

CİHAZIN KULLANIMI



1. AÇMA veya KAPATMA ve Masaj Yönü Kontrolü

Çalıştırmak için basın, masaj yönünü her dakika otomatik olarak değiştirir, sadece bir yönü ayarlamak için tekrar basın, ardından üçüncü kez başka bir yönü ayarlayın. Ünite 15 dakika içinde otomatik olarak kapanacaktır. Kapatmak için düğmeye uzun basın.

Şarj göstergesi:

Adaptörü taktığınızda, ışık kırmızıya dönerse ürünler şarj oluyor demektir, gösterge ışığı yeşile döndüğünde tamamen şarj olmuş demektir. Masaja başlarsanız, ürün şarj olmayı keser ve gösterge ışığı söner.



2.Hız kontrolü

3 hız seviyesi, varsayılan hız yüksek hızdır, bir kez düşük hıza basın, iki kez orta hıza basın, tekrar yüksek hıza basın.



Isıtıcı


Çalışırken ısıtma fonksiyonunu durdurmayı seçebilirsiniz, bir kez basın, ısıtma fonksiyonunu durdurun, tekrar basın, ısıtma fonksiyonu tekrar çalışır.

4. Masajı istediğiniz zaman durdurmak için açma kapama düğmesine basın.

MASAJ POZİSYONU



MAKİNE PARÇALARININ ADI VE İŞLEVİ

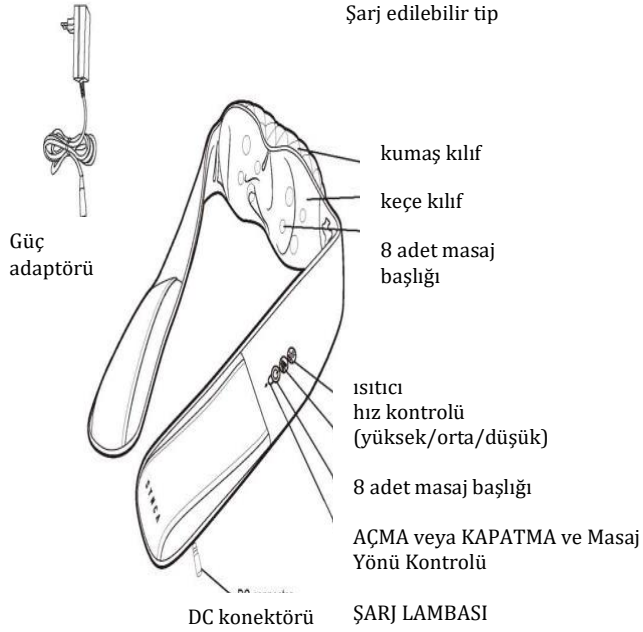

ÜRÜNÜ TEMİZLEMELİK VE BAKIMINI YAPMAK

1. Temizleme

Temizlemeden önce, lütfen anahtarın kapalı konumda olduğundan ve elektrik fişinin prizden çekildiğinden emin olun.

Ürünü temizlemek için lütfen kuru bez kullanın.



Dikkat

* * Lütfen ürünü temizlemek için benzin veya tiner ve diğer etkili deterjanlar kullanmadığınızdan emin olun, aksi takdirde ürün solabilir.

2. Bakım

Anahtarın kapalı olduğundan ve elektrik fişinin prizden çekildiğinden emin olun.

Ürünü temiz ve ıslak ortamdaki uzak tutun.

TEKNOLOJİ PARAMETRESİ

- Adı : Boyun & Omuz Masaj Aleti
- Tip : SM260
- Adaptör giriş : 100-240V~50/60HZ
- Çıkış : DC 13V 1.8A
- Pil Türü : Lityum-İyon 2200mAh 11.1V
- Pil Ömrü : Yaklaşık 2,5 saat (ısı olmadan)
- Pil Şarj Süresi : Yaklaşık 2,5 saat